

RCA

PREMIUM
line



RC-IPL5

DEPILADORA LUZ PULSADA

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Resultados duraderos
y una piel suave sin esfuerzo



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Depiladora Luz Pulsada RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Si el cable de alimentación está dañado, contacte a nuestro servicio de atención al cliente o con personal calificado, para prevenir accidentes.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación del producto:

12 V \equiv 4,0 A 48,0 A

Adaptador ca/cc:

Entrada: 100 V \sim - 240 V \sim 60 Hz 1,5 A

Salida: 12 V \equiv 4,0 A 48,0 A

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.



Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincida con la tensión eléctrica de su toma de corriente.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté conectado y/o encendido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente una vez que termine de ocuparlo.
- No utilice con las manos mojadas.
- No utilice diluyentes de benceno (solvente) u otros disolventes para limpiar el equipo.
- No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
- No use accesorios de otros modelos o marcas.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo y su adaptador secos.
- Si el dispositivo está roto, no toque ninguna parte interna para evitar descargas eléctricas.
- Siempre revise el dispositivo antes de usarlo. No utilice el dispositivo o el adaptador si alguno de ellos (o ambos) presentan signos de daños.
- Este dispositivo no es resistente al agua, por lo tanto, nunca debe sumergirlo en agua, lavararlo bajo el grifo o someterlo a cualquier modalidad de efectos del agua.
- Ante cualquier falla, desconecte el aparato. Si observa la cubierta del producto o de la ventana del flash (destello) rota, no intente repararlo por usted mismo; por favor, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato excepto por nuestro personal autorizado; de lo contrario, la garantía quedará invalidada.

ADVERTENCIAS:

- No deje ni guarde el producto cerca de tinas, lavabos, superficies húmedas o en áreas donde exista agua u otros líquidos.
- No utilice la unidad cerca de materiales inflamables (como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, gas, etc.).

PRECAUCIONES

- De usar el equipo en un cuarto de baño, tome las precauciones para que el dispositivo no entre en contacto directo con el agua, zonas húmedas o mojadas. Este dispositivo representa un riesgo en todas las situaciones anteriores, incluso estando apagado o desconectado.
- Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.
- No permita que el aparato toque cortinas, alfombras ni revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

NOTA: No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y 4170-7980 para el resto de la República.

Si no está seguro de poder utilizar el dispositivo, le recomendamos que consulte a su médico.

NOTA: La luz pulsada reduce el vello de forma progresiva, ya que sólo los folículos en fase de crecimiento son tratados con éxito. Es necesario realizar múltiples tratamientos para lograr una piel suave y sin vello visible a largo plazo.

NOTA: Esta tabla es únicamente una recomendación, cada persona tiene un tipo de vello y cuerpo diferente, por lo que el nivel de intensidad puede variar.

Para comprobar si su tipo de vello permite el uso del aparato, consulte la tabla de tipos de vello.

TIPOS DE PIEL

IMPORTANTE

Para comprobar si su tono de piel y tipo de vello permiten el uso del aparato, consulte la tabla de tonos de piel.

COLOR	TIPO DE PIEL	CARACTERÍSTICAS	INTENSIDAD
	Piel muy clara	Ultrasensible al sol y muy propensa a quemaduras. No se broncea.	
	Piel clara	Es sensible al sol y propensa a quemaduras. Se broncea muy poco.	
	Piel morena clara	Resistencia normal al sol. Se broncea gradualmente.	
	Piel morena oscura	Es más resistente al sol. Se broncea con facilidad.	
	Piel oscura	Raramente se quema al exponerse al sol. Se broncea rápido.	
	Piel muy oscura	Piel con profunda pigmentación. Se broncea de inmediato.	No se recomienda el uso del producto por la capacidad de atraer la energía térmica y aumentar la posibilidad de quemadura.

COLOR	TIPO DE VELLO	CARACTERÍSTICAS	USO DEL APARATO
	Castaño	Presenta concentración de melanina, se puede eliminar.	Inhibe o detiene el crecimiento del vello.
	Café claro	Presenta concentración de melanina, se puede eliminar.	Inhibe o detiene el crecimiento del vello.
	Café	Presenta concentración de melanina, se puede eliminar.	Inhibe o detiene el crecimiento del vello.
	Café oscuro	Presenta concentración de melanina, se puede eliminar.	Inhibe o detiene el crecimiento del vello.
	Negro	Presenta concentración de melanina, se puede eliminar.	Inhibe o detiene el crecimiento del vello.
	Rubio	Presenta concentración de melanina reducida, sin embargo, se puede eliminar.	Inhibe o detiene el crecimiento del vello.
	Blanco	No presenta suficiente melanina.	Puede no inhibir ni detener el crecimiento del vello.
	Gris	No presenta suficiente melanina.	Puede no inhibir ni detener el crecimiento del vello.
	Pelirrojo	No presenta suficiente melanina.	Puede no inhibir ni detener el crecimiento del vello.

NOTA: Esta tabla es únicamente una recomendación, cada persona tiene un tipo de vello y cuerpo diferente, por lo que el resultado en el vello puede variar.

NOTA: Tome en cuenta que la tecnología IPL alcanza su mayor eficacia cuando el vello es oscuro y la piel clara, ya que funciona basada en la percepción de la melanina en los folículos donde nace el vello.

NO UTILIZAR EL APARATO SI:

NOTA: Esta lista no es exclusiva o excluyente. Si no está seguro de poder utilizar el dispositivo, le recomendamos que consulte a su médico.

- Si es menor de 18 años. Los efectos del uso del sistema en este grupo de edad son desconocidos.
- Si tiene un trastorno de piel conocido.
- Si tiene enfermedades de la piel como dermatitis alérgica, llagas, psoriasis, eccema, quemaduras, herpes simple, heridas o sarpullidos. Estas condiciones pueden hacer que la piel sea más sensible al tratamiento con luz, lo que podría hacer que el tratamiento sea incómodo, causar hinchazón, ampollas o infecciones. Si su condición en la piel presenta mejoría lo suficiente para usar el dispositivo, por favor, consulte a su médico.
- Si está en su ciclo menstrual.
- Si sufre de quemaduras.
- Si tiene piel oscura con manchas o quemaduras solares (tome como referencia la tabla de tonos de piel).
- Si tiene piel dañada, cicatrices, cáncer o hemangiomas.
- Si se usa sobre cualquier estético artificial, protésico o área de plástico.
- Si está en un alto riesgo de desarrollar reacciones cutáneas, como hiperpigmentación e hipopigmentación, enrojecimiento intenso o quemaduras.
- Si está embarazada o en período de lactancia.
- Si tiene implantes activos, como marcapasos, bomba de

insulina, neuroestimulantes, etc.

- Si su piel está siendo tratada actualmente o ha sido tratada en la última semana con alfa-hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxiácidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado isotretinoína (Accutane® o Roacután®) en los últimos seis meses. Este tratamiento puede hacer que la piel sea más susceptible a desgarros, heridas e irritaciones.
- Si está tomando agentes fotosensibilizantes o medicamentos. Revíselos y nunca use el aparato si se indica que puede causar reacciones fotoalérgicas, reacciones fototóxicas o si debe evitar el sol al tomar esta medicina.
- Si toma medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios.
- Si ha recibido radioterapia o quimioterapia, consulte antes a su médico, ya que esto puede representar un riesgo para su salud.
- Si está tomando analgésicos que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si toma medicamentos inmunosupresores.
- Si ha sido operado en las zonas a tratar, consulte antes a su médico, ya que esto puede representar un riesgo para su salud.
- Si tiene diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas, consulte antes a su médico, ya que esto representa un riesgo para su salud.
- Si padece de una enfermedad cardíaca congestiva.
- Si tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como erupción polimórfica de luz (PMLE), urticaria solar, porfiria, etc.
- Si tiene antecedentes de trastornos de colágeno, incluidos antecedentes de formación de cicatrices queloides o de mala cicatrización de heridas.
- Si tiene epilepsia por sensibilidad a la luz de una linterna.

- Si su piel es sensible a la luz y desarrolla fácilmente erupciones o reacciones alérgicas.
- Si tiene o tuvo antecedentes de cáncer.
- Si tiene o tuvo antecedentes de alteraciones vasculares, como la presencia de várices o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Si tiene algún trastorno hemorrágico.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunosupresora (incluida la infección por VIH o SIDA).
- Si tiene infecciones, eccemas, quemaduras, inflamación de los folículos pilosos, laceraciones abiertas, abrasiones, herpes simple o labial, heridas, lesiones y hematomas en las zonas a tratar.
- Si tiene piel irritada, enrojecida, cortada, quemada por el sol, recién bronceada o bronceado artificial (pintura de piel).
- Si tiene exceso de vello visible en las extremidades a tratar.



ADVERTENCIAS

- No utilizar en las siguientes zonas sin consultar previamente con su médico: lunares, pecas, venas grandes, zonas pigmentadas más oscuras, cicatrices y anomalías cutáneas. Esto puede provocar una quemaduras o cambios en el color de la piel, lo que dificulta la identificación de enfermedades relacionadas con la piel.
- No utilice el aparato en las zonas donde tenga: verrugas, tatuajes o maquillaje permanente.
- No utilice el producto alrededor de los ojos (pestañas y cejas), fosas nasales y oídos.
- No utilice en los labios, pezones, areolas, labios menores, vagina y ano.
- Los hombres no deben utilizar el dispositivo en la cara, cuello, zonas de crecimiento de la barba y tampoco en la zona genital (pene, testículos y ano).
- No utilice en las zonas donde utiliza desodorantes de larga duración. Esto puede provocar reacciones cutáneas.
- No utilice sobre o cerca de cualquier cosa artificial como implantes de silicona, puertos de inyección subcutánea (por ejemplo, un dispensador de insulina) o perforaciones.


IMPORTANTE

No use este aparato para ningún otro propósito. Hacerlo puede exponerlo a una situación peligrosa.

DESCRIPCIÓN DE PARTES



1. Cabezal magnético
2. Ventana de tratamiento
3. LED Indicador de estatus
4. Botón de función de enfriamiento
5. Pantalla LCD
6. Botón de encendido
7. Botón de accionado
8. Entrada para el adaptador
9. Par de lentes
10. Dos paquetes de 4 hisopos c/u
11. Cable de alimentación y adaptador
12. Ícono de función de enfriamiento
13. Nivel de tratamiento
14. Contador de pulsos restantes

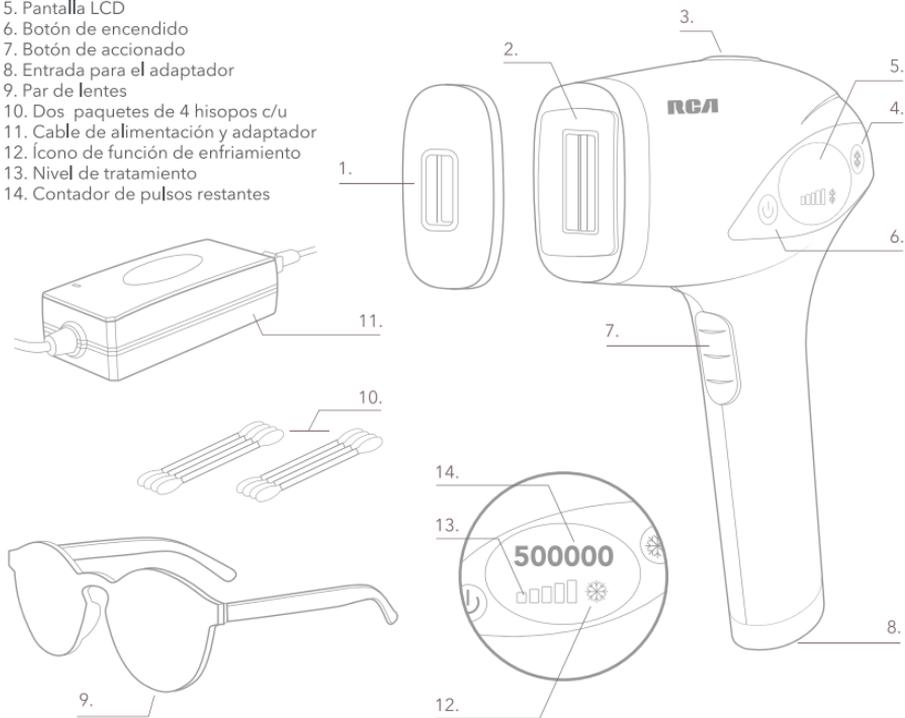


En un área pequeña de la parte superior del brazo, comience usando el aparato con una intensidad baja para probar su tolerancia. Si no siente ninguna molestia o irritación, vaya subiendo poco a poco el nivel de intensidad hasta llegar al nivel máximo. Esto con el objetivo de medir la tolerancia que tiene su piel.



Después de 2 horas, si presenta enrojecimiento, quemaduras, dolor punzante u otros síntomas, consulte con su médico antes de seguir utilizando el dispositivo.

NOTA: Recuerde que cada zona del cuerpo tiene una sensibilidad diferente. Si experimenta alguna molestia, utilice el aparato en el nivel que su piel tolere.

1. Limpie su piel y asegúrese de que esté completamente seca, libre de vello visible y de sustancias grasas. No utilice ningún tipo de gel o cremas depilatorias a la hora de usar la depiladora.

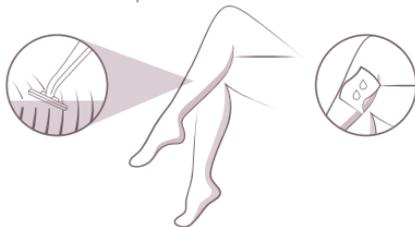

2. No utilice lápiz o bolígrafo para marcar las zonas a tratar. Esto puede causar quemaduras en la piel.

3. Limpie la ventana de salida de luz con un paño húmedo o un hisopo.

4. Encienda el aparato y seleccione la intensidad de luz adecuada para su tono de piel. Consulte las tablas de tonos de piel y tipos de vello (pág. 5 y 6) para determinar la configuración correcta.

5. No trate la misma zona más de una vez durante una sesión. Esto no mejora la eficacia del tratamiento, pero aumenta el riesgo de reacciones secundarias no deseadas.

6. La depilación con luz pulsada no debe ser dolorosa, tampoco deben sentirse molestias. Si es así, reduzca la intensidad de la luz o cancele el proceso de depilación.

7. No toque la parte interior de la ventana de salida de luz hasta que se haya enfriado.

8. Por razones de higiene, el dispositivo solo debe ser utilizado exclusivamente por una persona.

IMPORTANTE

El uso de lentes de sol aumentará el margen de cuidado y disminuirá el riesgo de daño que pueda llegar a producir la exposición intensa de la luz en los ojos.

NOTA: No utilice cremas depilatorias, ya que los productos químicos pueden provocar reacciones cutáneas.

NOTA: Este aparato funciona con energía eléctrica, no es inalámbrico. Debe dejar el adaptador conectado a una toma de corriente para que funcione. Este adaptador proporciona características adicionales para garantizar un funcionamiento seguro y no debe ser reemplazado por otro tipo de adaptador.

1. Use los lentes antes de iniciar con el procedimiento de depilación y durante el mismo.
2. Introduzca el extremo del cable del adaptador en la parte inferior del mango de la depiladora, conecte la punta de plástico del cable de alimentación en el orificio del adaptador y por último, coloque la clavija del otro extremo en un tomacorriente.
3. Verifique que la luz indicadora verde, ubicada en la parte superior de la depiladora, se encienda y titile levemente, lo que indica que el equipo está correctamente conectado.
4. Presione el botón de encendido durante dos segundos. El sistema de ventilación del dispositivo se activará (emitirá un sonido y vibración), la pantalla LCD se encenderá y la luz indicadora verde se apagará.
5. Si lo desea, presione rápidamente el botón de función de enfriamiento para activar o desactivar.

NOTA: El botón de función de enfriamiento está diseñado para tener un mejor cuidado de la piel al disminuir la temperatura del marco alrededor de la ventana de tratamiento, para poder aplicarse antes y durante la depilación. Esta función no tiene ningún efecto médico ni terapéutico más allá del enfriamiento de la piel para hacer el tratamiento más tolerable y cómodo. El marco alcanza temperaturas muy bajas que pueden o no ser tolerables al tacto prolongado, dependiendo de cada persona. Monte el cabezal magnético sobre la ventana del tratamiento en la

depiladora para que, a manera de aislante, pueda elegir y regular el frío a sentir en su piel.

6. Sin oprimir ningún botón, ponga en contacto la ventana de flasheo (destello) con la piel para que el sensor la detecte. Si la luz indicadora se enciende de manera continua mientras se hace el contacto, quiere decir que la depiladora está lista para usarse.

NOTA: El cabezal magnético se puede montar o desmontar, por medio de sus imanes integrados, al sólo empalmarlo o jalarlo de encima de la ventana de tratamiento, para poder elegir entre reducir o usar de manera predeterminada la superficie de disparo del flash (destello) y delimitar el área de focalización de la luz en zonas más pequeñas de la piel.

7. Una vez que el dispositivo haya detectado la piel por primera vez al encenderse, se ajustará el nivel de tratamiento al nivel 1 como configuración predeterminada. Presione rápidamente el botón de encendido para cambiar entre los 5 niveles, de acuerdo a las recomendaciones de la tabla de tonos de piel y su conveniencia.
8. Una vez seleccionado el nivel de tratamiento, dirija la ventana del flash (destello) hacia la piel (que pueda cubrir la ventana de luz por completo). Tome firmemente la depiladora desde el mango y aplique la ventana de tratamiento del producto en un ángulo de 90° sobre la zona a tratar, para que el aparato y el sistema de seguridad integrado estén en contacto con su piel. El sistema de seguridad evita el destello involuntario sin contacto con la piel.
9. Aplique la luz pulsada en la zona seleccionada presionando el botón de accionado del flash (destello). Continúe con su proceso de depilación.

NOTA: No dirija un destello cerca o directamente a los ojos.

10. Después de cada flash (destello), deberá esperar aproximadamente 3 segundos para poder usarse de nuevo. La depiladora emitirá destellos de manera automática, únicamente si se coloca correctamente sobre la piel mientras se oprime el botón de acción durante 3 segundos. Para detener el modo automático y regresar al pulso manual, presione rápidamente el botón de acción.

NOTA: No deslice el flash dos o más veces sobre la misma área, hágalo una sola vez por la zona que desee depilar.

11. Cuando haya terminado con su depilación, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 a 3 segundos hasta que la luz verde parpadee y cesen la vibración el sonido, esto indicará que el producto está apagado y podrá desconectarlo para los cuidados de enfriamiento, limpieza y guardado.

12. Una vez se haya enfriado, limpie la ventana del flash (destello) utilizando un paño húmedo.

13. Al terminar la depilación deberá refrescar la piel con una toalla húmeda a temperatura ambiente (si nota alguna reacción adversa en la piel, se recomienda disminuir la intensidad de uso, o bien suspender el tratamiento).

NOTA: Puede usar un tónico o crema hidratante, libre de alcohol y fragancias, de su preferencia para ayudar a la piel a permanecer hidratada después de la depilación.

PRECAUCIÓN: En la siguiente figura se indican los tiempos máximos de exposición recomendados para

el uso de la depiladora. No se recomienda exponer las zonas del cuerpo, por más tiempo del indicado, a los destellos del dispositivo.



NOTA: Recuerde que esto es un aproximado, cada piel es diferente, por lo tanto, los resultados pueden variar.

PRECAUCIÓN: No se recomienda usar múltiples veces sobre la misma zona de la piel. Tome precauciones.

IMPORTANTE

No bloquee la ventilación para no afectar el enfriamiento del aparato.

NOTA: Con el uso frecuente del aparato es posible que aparezcan pequeños puntos blancos dentro del lente. Esto no afectará el funcionamiento normal ni la vida útil del aparato.

Las primeras 3 sesiones deben hacerse cada semana. A partir de la cuarta sesión, aplique el tratamiento cada 2 semanas hasta comenzar con las sesiones de retoque.

- Sesión 1: Semana 1
- Sesión 2: Semana 2
- Sesión 3: Semana 3
- Sesión 4: Semana 5
- Sesión 5: Semana 7
- Sesión de retoque



NOTA: Se recomienda rasurar antes de cada aplicación para mejorar los resultados.

A partir de la sexta o séptima sesión (según observe el efecto en su piel), repita el tratamiento de una a 3 veces al mes, dependiendo del comportamiento del vello y de los resultados.

IMPORTANTE

El uso puede variar dependiendo de la persona, utilícelo con menos frecuencia en las áreas donde el vello crece en menor cantidad.

FASES DE RETOQUE

El tiempo entre sesiones puede variar según el crecimiento del vello individual, el área y la etapa hormonal en la que se encuentra el cuerpo.

DESPUÉS DE SU USO

NOTA: Si el aparato no está funcionando correctamente o la luz indicadora se mantiene encendida sin parpadear, siga los siguientes pasos.

1. Asegúrese de que la ventana del flash (destello) esté lo suficientemente cerca de la piel.
2. Si la luz indicadora está encendida sin parpadear, apunte nuevamente la ventana del flash (destello) hacia la piel por 3-5 segundos y revise si ha vuelto a su funcionamiento.
3. Después de seguir los pasos anteriores, apague y encienda nuevamente el aparato. Si la acción superior no lo resolvió, por favor contacte a nuestro servicio al cliente.

- Si experimenta irritación o enrojecimiento de la piel después del tratamiento, se recomienda aplicar lociones o cremas humectantes (que no contengan alcohol ni perfume) en las áreas tratadas.
- Si la irritación de la piel persiste después de aplicar loción o crema hidratante, lave la zona con agua.
- Proteja todas las áreas de la piel con bloqueador solar de alta fotoprotección y evite la exposición al sol.

NOTA: Incluso si sigue todas las instrucciones, podría experimentar reacciones cutáneas. En este caso, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con su médico.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Quemaduras, y enrojecimiento excesivo: Son el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel. Espere hasta que la piel se haya curado por completo para realizar la siguiente sesión, asegúrese de usar una intensidad de luz más baja.
- Decoloración de la piel: Este es el resultado de usar una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel. No trate las áreas decoloradas hasta que la decoloración haya desaparecido y su piel haya recuperado su tono normal.
- Calentamiento epidérmico: Espere para la siguiente sesión hasta que la piel se haya curado por completo y asegúrese de usar una intensidad de luz más baja.
- Ampollas: Este es el resultado de usar una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel. Espere para la siguiente sesión hasta que la piel se haya curado por completo y asegúrese de usar una intensidad de luz más baja.
- Foliculitis: Es el resultado de la penetración de

bacterias en la piel dañada. En caso de que se produzca esta reacción, le recomendamos que consulte a un médico, ya que la foliculitis puede necesitar de un ungüento o antibiótico.

- Dolor excesivo: Esto puede ocurrir durante o después del tratamiento si ha usado el aparato en una piel que no está libre de vellos visibles, si usa el producto con una intensidad de luz demasiado alta para su tono de piel, si destella la misma área más de una vez y si lo utiliza en heridas abiertas, inflamaciones, infecciones, tatuajes, quemaduras, etc.

Si no está seguro de poder utilizar el aparato o recibe algún efecto secundario, le recomendamos que consulte a su médico.

- Después de su uso, apague el producto, desenchúfelo y déjelo enfriar.
- Los vellos atascados en el aparato pueden causar puntos blancos en el producto, pero no afecta el desempeño del aparato ni su funcionamiento normal.
- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo.
- No permita que el aparato le entre agua, ya que podría dañar su funcionamiento.
- Con el paso del tiempo, la pared interna del foco tomará distintas tonalidades de negro, esto es resultado del proceso de desgaste normal de los tubos. No se preocupe, puede seguir utilizándolo.
- Este producto no es a prueba de agua, evite el contacto con el agua.

ALMACENAMIENTO

- Nunca deje el producto desatendido cuando esté encendido. Apague siempre el aparato después de su uso.
- No almacene el producto cerca de campos magnéticos fuertes, humedad, polvo o altas temperaturas.
- Evite el daño y mantenga fuera del alcance de niños.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la depilación IPL y cómo funciona?

La depilación IPL (Intense Pulsed Light en inglés), conocida como depilación con luz pulsada intensa o fotodepilación, inhibe el crecimiento del vello atacando el folículo a través de pulsaciones de luz suave. Esta luz es policromática y de amplio espectro, compuesta por partículas que viajan en distintas direcciones y en diferentes longitudes de onda. La melanina, un pigmento que se encuentra en el vello,

absorbe estos flashes de luz y estimula al folículo para que entre en su fase de reposo: de esta manera, el vello se cae y deja de crecer de forma gradual.

Esta tecnología actúa por el principio de la fototermólisis selectiva, la cual permite la eliminación total del folículo piloso, utilizando específicamente a la melanina presente en el vello para absorber la luz y transformarla en calor.

Este método se puede llevar a cabo siempre y cuando el vello tenga melanina suficiente, ya que ésta actúa como conductor de la luz.

¿Qué esperar de la depilación IPL?

Se recomiendan mínimo de 6 a 8 sesiones por zona para obtener resultados visibles.

NOTA: Existen diferentes factores que pueden cambiar el número de sesiones como:

- **Tono y grosor:** El vello grueso y más oscuro será más fácil de eliminar que el claro o muy fino.
- **Zona a depilar:** Habrá zonas del cuerpo que requieren menos sesiones para obtener un resultado, por ejemplo las axilas; y otras que necesiten más sesiones como el rostro y el área del bikini.
- **Cambios hormonales:** Estos cambios pueden ser causados por distintos factores como tomar medicamentos, enfermedades, clima etc. Pueden ocasionar el crecimiento del vello en algunas zonas, aún después de terminar el tratamiento de depilación.
- **Cambios notables con el uso habitual del producto:**
 1. El vello tardará más tiempo de lo habitual en salir.

Una vez que el vello tratado sale, se desprende y caerá solo, por lo cual es importante evitar el rasurado entre sesiones, para verificar que esto pase.

3. El vello nuevo saldrá más delgado e incluso puede haber áreas donde no salga, dependiendo de la zona.

¿La depilación IPL causa dolor?

La depilación IPL es un procedimiento indoloro, esto hace que sea un método apto para usar en casa. No obstante, por ser un tratamiento de depilación de luz pulsada, puede representar ciertos riesgos para algunas personas en particular; como por su tipo de piel o tono de vello, también si presenta algún padecimiento o irregularidades en la zona a tratar.

Si no está seguro de poder utilizar el aparato, percibe o nota algún efecto secundario le recomendamos que consulte a su médico.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras lo usa y hasta que se haya enfriado.
- No utilice este equipo cerca de una ducha o una piscina.
- Queda prohibido su uso para otros fines a los permitidos.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar o causar un daño al aparato: este no debe de ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente apague y encienda la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz,

Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	

